



Weight
55-60 gr/m²

Peso
55-60 gr/m²

Color
Blue - White

Colore
Blu-Bianco

ONE SIZE
48 cm high and
31 cm at the base
TAGLIA UNICA
48 cm d'altezza e
31 cm di base

FABRIC PP NONWOVEN / PE BARRIER DISPOSABLE
TESSUTO PP NON TESSUTO / BARRIERA PE MONOUSO



USAGE; Used for HIGH risk situations **UTILIZZO;** Utilizzare in situazioni ad ALTO rischio

I copriscarpe monouso per uso medico hanno diversi livelli di protezione a seconda delle esigenze dell'utente. Ci sono gomma e 2 lacci sul prodotto per un facile utilizzo e una maggiore protezione. Ci sono 2 evas nella parte inferiore per ridurre il rischio di scivolamento durante l'uso. BRBEN offre una gamma di copriscarpe medicali impermeabili e copriscarpe alti fino al ginocchio per un significativo aumento della protezione di chi lo indossa per situazioni ad alto rischio di esposizione ai liquidi.

DATA DI CONSERVAZIONE / SCADENZA:

Si consiglia di conservarlo in scatole di cartone a 15 -25 °C lontano dalla luce solare. Se conservato in condizioni adeguate, deve essere utilizzato entro 5 anni dalla data di produzione.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO:

I prodotti che non sono contaminati possono essere trattati come rifiuti generici o riciclati. Prodotti che sono stati contaminati devono essere trattati come rifiuti pericolosi e smaltiti come rifiuti pericolosi in conformità con le normative nazionali.

Disposable medical shoe covers have varying levels of protection depending on the user's needs. There are rubber and 2 laces on the product for ease of use and higher protection. There are 2 evas at the bottom to reduce the risk of slipping during use. BRBEN offers a range of impervious medical shoe covers and knee-high boot covers for a significant increase in wearer protection for situations with high risk of liquid exposure.

STORAGE / EXPIRY DATE:

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

DISPOSAL AND RECYCLING:

Products that are not contaminated can be treated as general garbage or recycled. Products that have been contaminated should be treated as hazardous waste and disposed of as hazardous waste in accordance with national regulations.



Siediti su una sedia
Sit in a chair



Prendi un pezzo in mano e apri la bocca tenendo il bordo
Take one piece to hand and open the mouth by holding the edge



Indossalo senza problemi
Wear smoothly



Lega i lacci
Tie the laces



Verificare il raccordo
Check the fitting

Prima di usare; Si prega di controllare i prodotti prima di utilizzarli, non utilizzare prodotti strappati o difettosi.

Before using; Please check the products before using them, do not use torn or faulty products.



D.P.I. monouso
DA NON RIUTILIZZARE!
Disposable PPE,
DO NOT REUSE!

CERTIFICA NO
CERTIFICATE NO

CE 2163-PPE-1592



Protective Clothing CatIII
Abbigliamento protettivo CatIII
III Typ PB [6]-B



Protezione Limitata da Schizzi di Sostanze Chimiche Liquide - Type 6-B
Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
L_{min}, 82/90 ≤ 30 %

(Protective clothing against infectious agents)
of category PB [6] -B. Class III



(Chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals)
Type PB [6], limited life protective clothing,


Protezione da Particelle Solide - Type 5-B
Protection Against
Pathogenic Organisms.
EN 14126:2003 AC:2004



EN ISO 13688:2013

(General requirements for protective clothing)

Tessuto traspirante
Breathable fabric

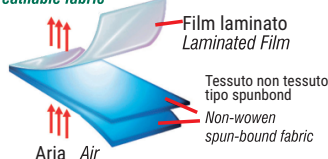

NON LAVARE
Not washing



NON ADATTO ALL'ASCIUGATRICE
No drying



NON LAVARE A SECCO
No cleaning



NON STIRARE
No ironing



NON CANDEGGIARE
No bleach



LONTANO DAL FUOCO RESISTI
Keep away from fire

RIVENDITORE:

TURIN EVENTS S.A.S.

C.so Duca degli Abruzzi, 34 - 10129 Torino - www.turinevents.it

Tel. 011 024.32.82 - P. Iva 11551770016 - amministrazione@turinevents.it